


はじめに

本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。安全かつ適切にご使用頂くため、本書をお読みの上で用法を守って正しくお使い下さい。また、いつでもお読みいただけるように大切に保管して下さい。

付属品・各部説明

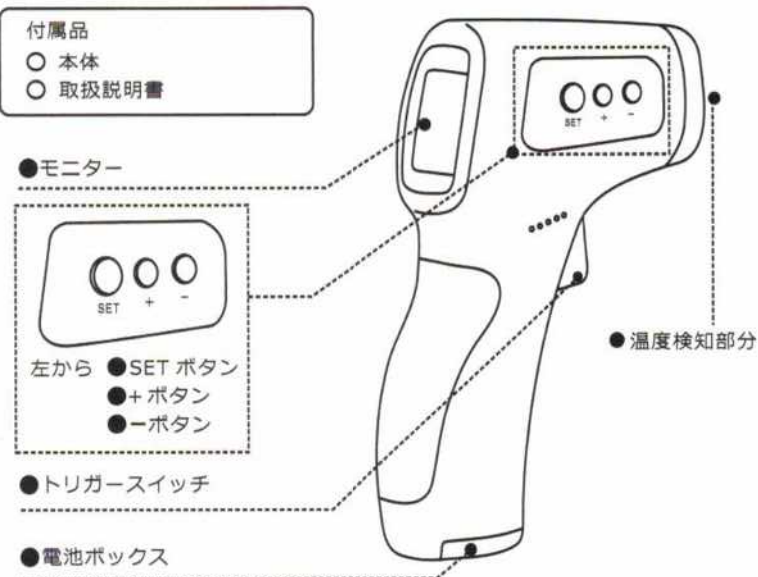

使用方法

【温度の測定】

- ① 本体底部にある電池ボックスのふたを開け、単四電池 2 本 (別売り) を + の向きを確かめてから入れます。
- ② 温度を測りたい対象へ温度検知部分に向け、対象と約3~5cm ほど距離が開いた状態で、トリガースイッチを押して下さい。
- ③ 約 1 秒ほどでモニターに測定温度が表示されます。

【ブザー音と表示】

- 31.9℃以下 : 『LO』と表示(計測できません)
- 32℃~37.4℃ : 測定温度が表示、短く音が鳴る
- 37.5℃以上 : 測定温度が表示され警告音、短く3回音が鳴る
- 43℃以上 : 『HI』と表示(計測できません)

(測定記録の確認)

最新の測定記録から 32 件を記録します。
記録は測定モードの状態 で + ボタンを押すことで確認ができます。
+ ボタンを押すと、1→32 の順に記録を確認できます。
- ボタンを押すと、32→1 の順に記録を確認できます。

【設定の変更】

モニターが温度測定画面の状態 で SET ボタンを押すとモード切り替えが出来る。

使用上・安全上の注意

○本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。○実際の温度と多少の誤差が生じる場合がありますので、取引または証明用として使用することはできません。○本製品に強い力をかけたり、重い物を置かないでください。○本製品を投げたり、振り回したりしないでください。○分解、改造は絶対におやめください。○強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないで下さい。○高温多湿な場所には置かないでください。○長時間、直射日光の当たる場所に置くと、変色 劣化する恐れがあります。直射日光の当たる場所は避けて下さい。○幼児の手の届く場所には、置かないでください。○古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。○電池の (プラスマイナス) を正しくセットしてください。○万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。○長時間使用しない場合は電池を外してください。○万が一破損した場合は、ご使用にならないでください。○濡れた手でさわらないでください。感電する恐れがあります。○ショートさせたり、加熱・火の中に入れてたりしないでください。○譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合は、弊社サポート対象外となります。○本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。

お問い合わせ先

販売者

株式会社: Hardies

大阪府大東市御領3-9-26

